

senseus™

Die neue Endo-Sensation



Sensorik

Sensitivität

Spitzenqualität

Sensation

Sensualität

- Erleben Sie einen neuen Maßstab bei Arbeitskomfort und taktiler Sensibilität
- Entdecken Sie einen neuen Grad der Kontrolle und Präzision
- Erreichen Sie eine neue Stufe der klinischen Leistungsfähigkeit und Sicherheit
- Erschließen Sie sich eine neue Welt endodontischen Erfolgs


Für maximalen Arbeitskomfort

senseus™



Der große, weiche, ergonomische Silikongriff sorgt für ein völlig neues Arbeitsgefühl und ein verbessertes klinisches Leistungsvermögen.

- Höherer Arbeitskomfort
- Verbesserte Drehmoment- und Kraftübertragung :
 - Geringerer Kraftaufwand bei größerem Griff
 - Exzellente Rutschfestigkeit beim Arbeiten mit Handschuhen
- Verbessertes taktiler Feedback
- Geringere Ermüdung

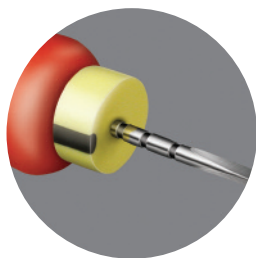

Röntgensichtbare Kalibrierringe steigern die klinische Leistungsfähigkeit bei Wurzelkanalbehandlungen durch :

- Verbesserte Diagnostik
- Höhere Präzision
- Leichtere visuelle Kontrolle



FlexoFile® FlexoReamer®

Das hochflexible Arbeitsteil mit Führungseffekt bewahrt die Kanalmorphologie und erhöht die klinische Sicherheit.

- Verlässlichere Kanalaufbereitung
- Geringere Gefahr einer Längsachsen-Verlagerung, Stufenbildung oder Perforation
- Geringeres Risiko eines Instrumentenbruchs



Dreieckiger Querschnitt*


- Hohe Flexibilität
- Hohe Schneideeffizienz



Batt® Spitze

- Nicht-schneidende 55° Batt® Spitze** mit abgerundetem Ende
- Sicherer und verlässlicher Führungseffekt

* ISO 015 und darüber; bei den kleineren Größen viereckiger Querschnitt

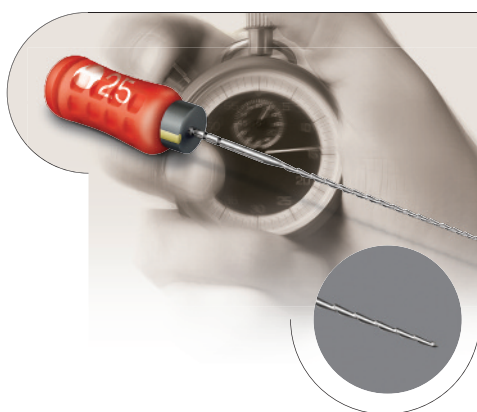


Hedstroem

- Genauere Beibehaltung der Kanalmorphologie und geringere Gefahr einer Längsachsen-Verlagerung oder Stufenbildung
- Hervorragende Schneideeffizienz



Arbeitsteil in Spitzenqualität


- Bewährtes Instrumentendesign
- Hochwertiger Schwedenstahl

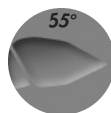

Führungsspitze

- Nicht-schneidende 55°-Spitze**
- Führungseffekt

** 75°-Spitze bei den Instrumentengrößen ISO 055 und darüber

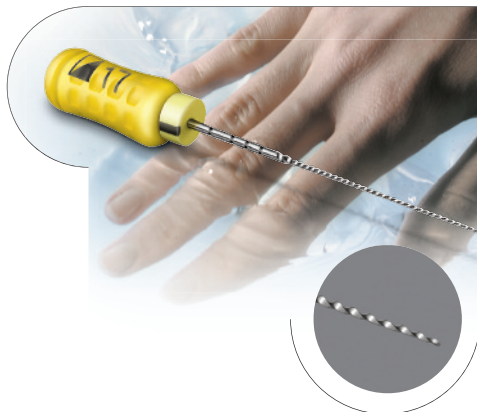


ProFinder™

Feile zum Gängigmachen von Wurzelkanälen

Dank seiner exklusiven, minimalen und variablen Konizität ist ProFinder™ ein bislang unübertroffenes Instrument zum Gängigmachen von Wurzelkanälen.

- Einfachere Schaffung eines Gleitwegs
- Schnelleres und effektiveres Sondieren schwieriger oder verkalkter Kanäle
- Leichteres Vordringen in den Kanal
- Höhere taktile Sensibilität

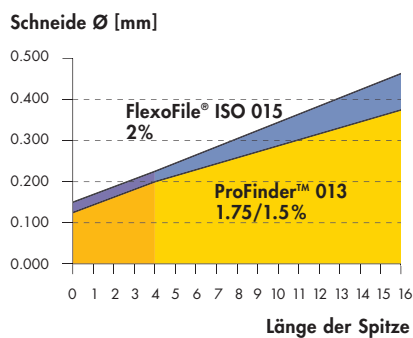

Arbeitsteil mit variabler und minimaler Konizität

- Viereckiger Querschnitt mit erhöhter Konizität im Spitzenbereich
 - Verbesserte Biegefestigkeit
- Minimale Konizität hinter dem Spitzenbereich
 - Höhere Flexibilität des Instruments


Führungsspitze



- Nicht-schneidende 65°-Spitze mit abgerundetem Ende
- Führungseffekt


“ Wenn Sie den Gleitweg meistern, werden Sie auch die rotierende Endo beherrschen. ”

Dr. Clifford J. Ruddle

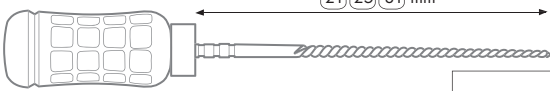


FlexoFile® REF A 1012

	Ø ISO	006	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
Einzelgrößen	6x															
Sortiment	015-040															
	045-080															

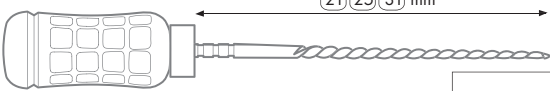


FlexoReamer® REF A 1011

	Ø ISO	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
Einzelgrößen	6x														
Sortiment	015-040														
	045-080														

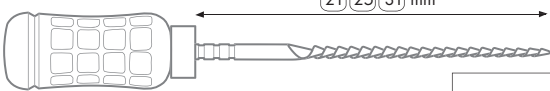

Hedstroem REF A 1016

	Ø ISO	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
Einzelgrößen	6x														
Sortiment	015-040														
	045-080														

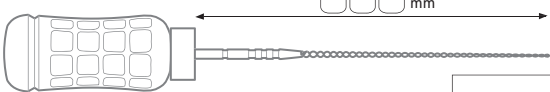

ProFinder™ REF A 1013

		010	013	017
Einzelgrößen	6x			
Sortiment	010-017			

* Erhältlich ab Herbst 2005

