

# kuraray

**Perfekte Teamarbeit  
für einen zuverlässigen Aufbau.**



**CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT**

**Stressfreier und einfacher Stumpfaufbau –  
für hohe klinische Anforderungen und zuverlässige Versorgungen.**

# CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT – die neue Kompetenz im Stumpfaufbau

## CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT – Leistungsüberblick

CLEARFIL™ DC CORE PLUS ist ein dualhärtendes (selbst- und /oder lichthärtendes) Zweikomponenten-Stumpfaufbaumaterial in einer Automix-Spritze. CLEARFIL™ DC CORE PLUS ist ideal geeignet für ästhetische und zuverlässige Restaurationen. Die selbsthärtende Eigenschaft dieses neuen Stumpfaufbaumaterials bietet die perfekte Lösung für schwer zugängliche Regionen im Wurzelkanal, welche nur bedingt mit Licht gehärtet werden können. Für alle anderen Bereiche können Sie die Äushärtung durch Licht beschleunigen.

Bei Stumpfaufbau-Restaurationen ist es wichtig, das Risiko einer Kontamination durch eine kurze und einfache Anwendung zu reduzieren. CLEARFIL™ DC CORE PLUS ist durch

seine vereinfachte Anwendung und optimale Pastehandhabung bestens für stressfreie Restaurationen geeignet. Dank der optimalen Verarbeitungszeit von 3 Minuten können alle Schritte – vom Einbringen in den Wurzelkanal bis zum Stumpfaufbau – praktischerweise mit nur einer Mischkanüle durchgeführt werden.

Darüber hinaus bietet die effektive, selbststützende Technologie einen zuverlässigen Halt an Dentin, ohne dabei das Dentin zu beschädigen. Die perfekte Ergänzung zu CLEARFIL™ DC CORE PLUS bietet Ihnen CLEARFIL™ S<sup>3</sup> BOND PLUS. Aufgrund seiner hervorragenden selbststützenden Haftkraft werden zusammen mit CLEARFIL™ DC CORE exzellente klinische Langzeitergebnisse ermöglicht.


## Ihre Vorteile

- ✓ Einfache und stressfreie Anwendung
- ✓ Geringeres Risiko von Wurzel- und Stumpfaufbaumaterialfrakturen dank eines optimalen Elastizitätsmoduls und besten mechanischen Eigenschaften
- ✓ Verringertes Debonding-Risiko und geringe Beschädigung des Dentins dank der Kuraray-Adhäsivtechnologie
- ✓ Kostengünstiges System: CLEARFIL S<sup>3</sup> BOND PLUS kann auch für direkte Füllungen verwendet werden

## Einfache und stressfreie Anwendung

CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT hat drei Vorteile, um Stress zu beseitigen und um das Kontaminationsrisiko zu verringern:

### 1. Kurzes Bondingverfahren mit CLEARFIL™ S<sup>3</sup> BOND PLUS

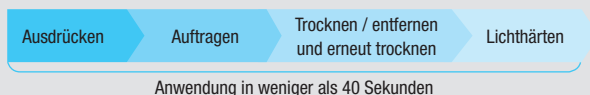

Kein Mischen, kein Schütteln der Flasche




Kein Einmassieren



Kein mehrfaches Auftragen

### 2. Optimale und lange Verarbeitungszeit mit nur einer Mischkanüle

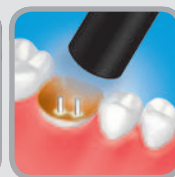

\*\* Nach dem Einbringen der Paste in den Wurzelkanal beträgt die Verarbeitungszeit der Paste 1 Minute. \* Stift muss vorbehandelt werden

⚠ Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.



### 3. Zwei Arten der Front Tips



## Geringeres Risiko von Wurzel- und Stumpfaufbaumaterialfrakturen

Das Dentin-ähnliche Elastizitätsmodul von CLEARFIL™ DC CORE PLUS vermeidet erhöhten okklusalen Stress am Wurzelende. Somit wird die okklusale Belastung über die gesamte Oberfläche des Wurzelkanals verteilt. Dank der hohen mechanischen Eigenschaften von CLEARFIL™



DC CORE PLUS wird darüber hinaus trotz des Kautresses eine stabile Restauration gewährleistet. Somit wird sichergestellt, dass das Risiko eines Materialbruchs in der Wurzel oder am Stumpfaufbau minimiert wird.

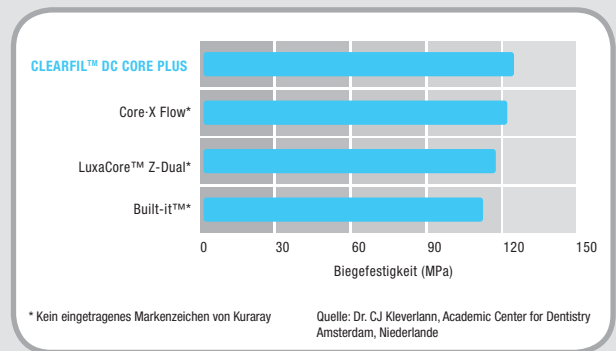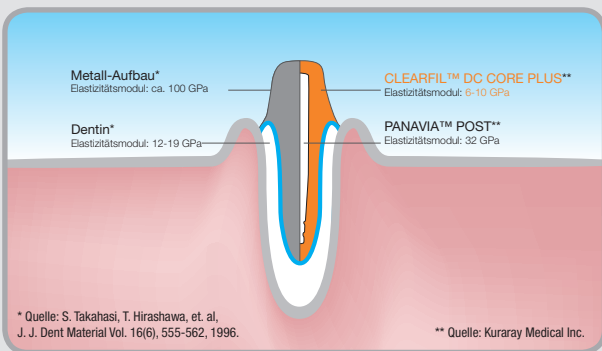


## Vermindertes Debonding-Risiko und geringe Dentin-Schädigung

CLEARFIL™ S<sup>3</sup> BOND PLUS ist das einfach anzuwendende, selbstätzende, lichthärtende Adhäsiv, welches insbesondere in Kombination mit CLEARFIL™ DC CORE PLUS aufgrund seiner spezifischen Beschleuniger für die Selbsthärtung hervorragende Ergebnisse liefert. Für jene Bereiche, die nicht vom Licht erreicht werden, ermöglicht die Selbsthärtung

hervorragende und zuverlässige Ergebnisse. CLEARFIL™ S<sup>3</sup> BOND PLUS schafft eine starke chemische Bindung an Hydroxylapatit. Dank der Kombination aus mildem Ätzen und MDP Monomer steht es für hohe Haftkraft und besticht durch zuverlässige Langzeithaftung an der Zahnschubstanz.

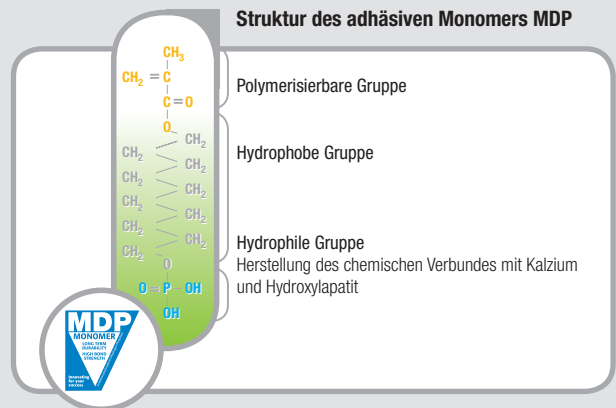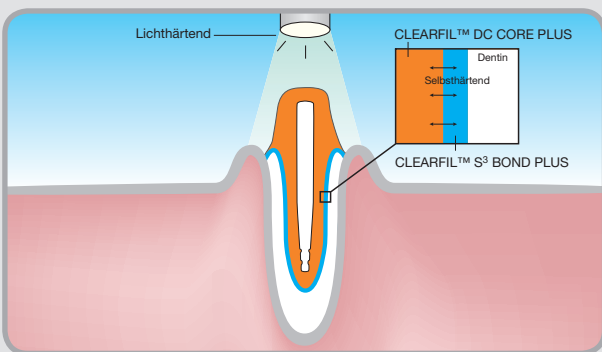

## Herausragende Haftwerte bestätigt!

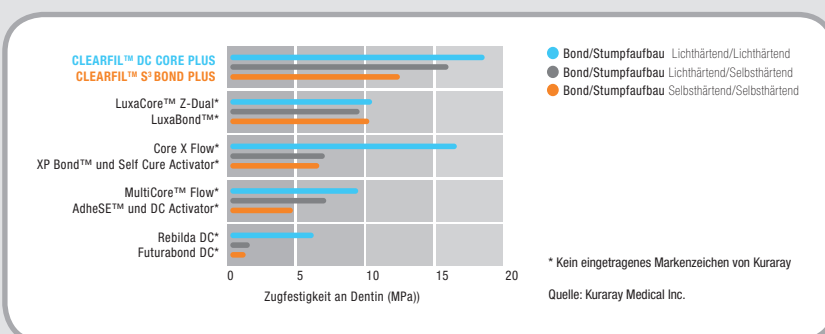

Diese Grafik zeigt die hervorragende Dentinhaftung im Vergleich zu anderen Stumpfaufbau-Systemen.

# CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT – Zusätzliche Produkt- und Bestellinformationen

## Produktsortiment



### CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT

**#2940 EU Dentin**

**#2941 EU White**

Inhalt: CLEARFIL™ DC CORE PLUS (White oder Dentin):

1 Applikationsspritze (17,9 g/9 ml); CLEARFIL™ S³ BOND PLUS:

1 Flasche (1 ml); Zubehör: 20 Mixing Tips, 10 Front Tips (L), 10 Front Tips (S), 50 Einwegpinsel (Endo), 1 Mischtablett, 1 Lichtschutzplatte

### CLEARFIL™ DC CORE PLUS Refill

**#2942 EU Dentin**

**#2943 EU White**

Inhalt: 1 Applikationsspritze (17,9 g/9 ml), 20 Mixing Tips,  
10 Front Tips (L), 10 Front Tips (S)

### CLEARFIL™ S³ BOND PLUS Refill

**#2892 EU** 1 Flasche 4 ml

### Zubehör

**#1029 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Front Tip (L)** 20 Front Tips

**#1030 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Front Tip (S)** 20 Front Tips

**#1031 EU CLEARFIL™ DC CORE PLUS Mixing Tips** 20 Mixing Tips

**#1025 EU CLEARFIL™ S³ BOND PLUS Pinsel (Endo)** 50 Einwegpinsel

### Produktempfehlung


#### PANAVIA™ POST Introductory Kit

**#1190-EU**


Inhalt: PANAVIA™ POST Nr. 3 (2 Stk.), Nr. 4 (2 Stk.),  
Nr. 5 (2 Stk.), Nr. 6 (2 Stk.)

## Farben

CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT ist  
in den folgenden Farben erhältlich:

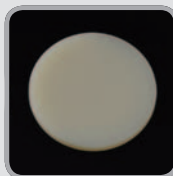

Dentin

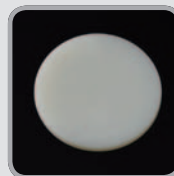

White

## Ihr Kontakt

Kuraray Europe GmbH  
BU Medical Products  
Philipp-Reis-Straße 4  
65795 Hattersheim am Main

Telefon: +49-(0)69-305 35835  
Fax: +49-(0)69-305 98 35835  
E-Mail: dental@kuraray.eu  
Website: www.kuraray-dental.eu

**kuraray**